

# AED

自動体外式除細動器

# AEDリモート監視システム

ARM-1000



## cardiolife AEDをお使いのすべてのお客様へ お客様ご自身による日常点検をサポートします

電極パッドの  
使用期限は  
いつ?

ステータス  
インジケータは  
緑色かな?

バッテリーの  
残量は  
どのくらい?


いろいろな場所に  
設置されている  
AEDの状態は  
どうなっている?





AED日常点検タグを  
よく見える所に!

### 忘れないで日常点検!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の手間を軽減する独自のサービスをご用意しております。お客様のご都合に合わせて、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。

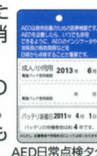

AED日常点検タグ

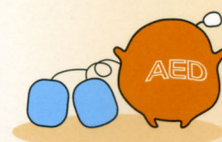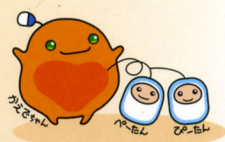

エレクトロニクスで病魔に挑戦

 NIHON KOHDEN

私たちの行動で救える命があります！

# いつでもAEDを使えるよう日常点検をサポートします！

毎日のセルフテストの情報は、リモート監視端末を通して、サーバに送信されます。

**送信されるAEDの情報** … AED本体の状態、電極パッドの使用期限、バッテリーの残量および廃棄期限等

AED設置管理担当者の方、AED点検担当者の方は、送信されたAEDの情報をWEB上で確認できます。

## 日常点検時


AED本体の状態、電極パッドの使用期限、バッテリーの残量および廃棄期限、AEDの位置情報の確認が可能です。

## AEDにトラブルなど

AEDにトラブルがあった場合や電極パッド・バッテリーの使用期限前に、登録されたメールアドレスに情報をお届けします。

## AED設置管理担当者

ご自身が管理されているAEDの情報をWEB上で確認できます

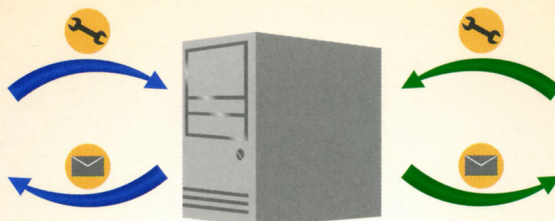

## AED点検担当者

ご自身が担当されているAEDの情報をWEB上で確認できます



## AEDリモート監視サーバ



- AED点検担当者の方は、日常点検の結果をWEB上の点検表に登録・確認できます。
- AED設置管理担当者の方は、複数の場所に設置されているAEDの情報をWEB上で確認することができます。
- リモート監視端末はバッテリー駆動のため、設置場所を限定しません。
- PHS回線を利用して、リモート監視端末からサーバへAEDの情報を送信します。

リモート監視システムは、AEDをご購入いただいたお客様に貸与させていただきます。AEDを廃棄する際には日本光電にご連絡ください。設置位置、電波状況等により、ご利用になれない場合がございます。リモート監視端末は、AED-2100専用です。詳しくは、当社営業員にお問合せください。




このカタログは、「植物油インキ」「水なし印刷」を使用しています。

★AED専用フリーダイヤル ☎0120-701699

<http://www.aed-life.com/> AEDを使用した救命処置の動画配信中

- ・添付文書を必ずお読みください。
- ・AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、日本光電またはAEDを購入された販売店にご連絡ください。

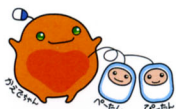

かえでちゃん(CAEDE:CPR AED Expert)は、心臓蘇生とAEDの普及をお手伝いするキャラクターです。

日本光電

日本光電工業株式会社 東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560 ☎03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

<http://www.nihonkohden.co.jp/>

CAT.NO.60-043A '11.9. SDL. CO. 6879