
# 私たちの行動で救える命があります!

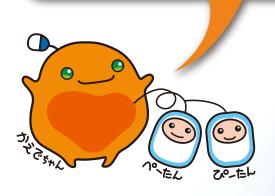

心臓突然死は、いつでも誰にでも起こる可能性があります。

日本での病院外の心臓突然死は年間5万人ともいわれており、

その原因のほとんどが「心室細動」です。

「心室細動」とは心臓がけいれんし、全身に血液を送るポンプとしての 役割を果たせない状態を言います。

この「心室細動」を治す唯一の治療方法が電気ショックを与えることです。 「心室細動」の発生から1分経過する毎に救命率が約7~10%低下します。 救命には、現場に居合わせた私たちができるだけ早く"心肺蘇牛+電気 ショック"を行うことが大切です。





## 救急隊が到着するまで救命処置を続けましょう



かえでちゃん (CAEDE: CPR AED Expert) は、心肺 蘇牛とAFDの普及をお手伝いするキャラクターです。



エネルギー充雷後、 ボタンを押すだけ

エレクトロニクスで病魔に挑戦







簡単操作・簡単点検を目指して

- **イラスト表示で分かりやすく操作方法をご案内。**
- ●電源ON時から100回/分の動作音
- **〕電極パッドの使用期限確認を含めた充実のセルフテスト**
- 日常点検が簡単なステータスインジケー
- **■異常箇所が一目で分かる診断パネル**

# 忘れないで日常点検!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置した ら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消 耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の 手間を軽減する独自のサービスをご用意しております。 お客様のご都合に合わせて、これらを利用し、いつでも AEDが使える状態にしておいてください。



## ■規格

電極パッド	使い捨て除細動パッド P-530シリーズ
出力エネルギ (50Ω時)	ActiBiphasic 成人モード時 1回目:150J 2回目:200J 3回目:200J 小児モード時 1回目:50J 2回目:70J 3回目:70J
音声ガイド	日本語
画面サイズ	縦約40.8×横約65.0mm
メモリ	救助データ:3件90分(1件あたり最大30分)の心電図波形とイベント情報 セルフテスト履歴:毎日のセルフテスト31件、毎月のセルフテスト12件、 その他のセルフテスト50件
バッテリ	バッテリバック NKPB-14301 リチウムバッテリ(充電不可) 待機寿命:約2年 容量:70回相当の除細動ショック、または約2時間の動作(新品のバッテリ、20℃のとき) バッテリバック NKPB-28271 リチウムバッテリ(充電不可) 待機寿命:約4年 容量:140回相当の除細動ショック、または約4時間の動作(新品のバッテリ、20℃のとき) ※待機寿命は設置環境や使用状況によって短くなります。
振動	MIL-STD-810F 514.5 カテゴリ4 トラック拘束荷 MIL-STD-810F 514.5 カテゴリ9 ヘリコブタ
落下	IEC60068-2-32 1.2m
外装保護	IEC60529 IP55 (装置の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に 侵入せず、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。)
寸法·質量	幅265×高さ100×奥行320mm(本体) 約2.6kg (パッドおよびバッテリパック NKPB-14301を含む) 約2.8kg (パッドおよびバッテリパック NKPB-28271を含む)

# ■消耗品

- ●バッテリパック NKPB-14301 X216
- ●バッテリパック NKPB-28271 X217
- ※バッテリと使い捨て除細動パッドは、 ご都合に合わせてお選びください。
- ●使い捨て除細動パッド P-530 H324
- ●使い捨て除細動パッド P-531 H324B
- ●小児用使い捨て除細動パッド P-532 H324D
- ・添付文書を必ずお読みください。
- ・電極パッドは使い捨てです。再使用できません。
- AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、 廃棄時には、日本光電またはAEDを購入された販売店にご連絡ください。

販売名: 自動体外式除細動器 AED-2150シリーズ カルジオライフ

医療機器承認番号 22400BZX00044000

クラス分類: 高度管理医療機器、 特定保守管理医療機器





インストラクション表示画面

# AEDリモート監視システム ARM-1000

の状態を集中管理する システムです。



- ●Web上でAED本体の状態、電極パッドの使用期限、バッテリの 残量等を確認できます。
- ●AEDにトラブルがあった場合や電極パッドやバッテリの使用期限 前に、ご登録いただいたメールアドレスに情報をお届けします。





このカタログは、「植物油インキ」「水なし印刷」を使用しています。

★AED専用フリーダイヤル **200120-701699** 

★AED専用ホームページ AEDライフ http://www.aed-life.com/

都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Bluetooth®はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。



日本光電工業株式会社 東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560 **└**03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

http://www.nihonkohden.co.jp/